



AEGIS LIFESCIENCES

PROTECTION THROUGH PERFECTION

CE
2460

FDA
REGISTERED FACILITY

ISO
13485

MDSAP
REGISTERED FACILITY

КОГДА
ВАЖНЫ
ГЕМОСТАТИКИ
ВАЖНЫ И МЫ




Aegis Lifesciences, основанная в 2008 году, является ведущим мировым производителем и экспортером по всем основным видам гемостатиков. Компания получила **международные сертификаты на соответствие требованиям системам управления качеством CE 2460, MDSAP и ISO 13485**. Экспорт в более чем 100 стран, включая регионы с жестко регулируемыми требованиями, такие как Европа (EC), США, Канада, Бразилия (ANVISA), Великобритания, Россия, Ближний Восток и т.д.

МИССИЯ

Улучшить жизнь пациентов по всему миру путем разработки и производства инновационных, высококачественных и экономически эффективных медицинских устройств.

ДЕНИЕ

Быть ведущим мировым поставщиком гемостатических продуктов и технологий.

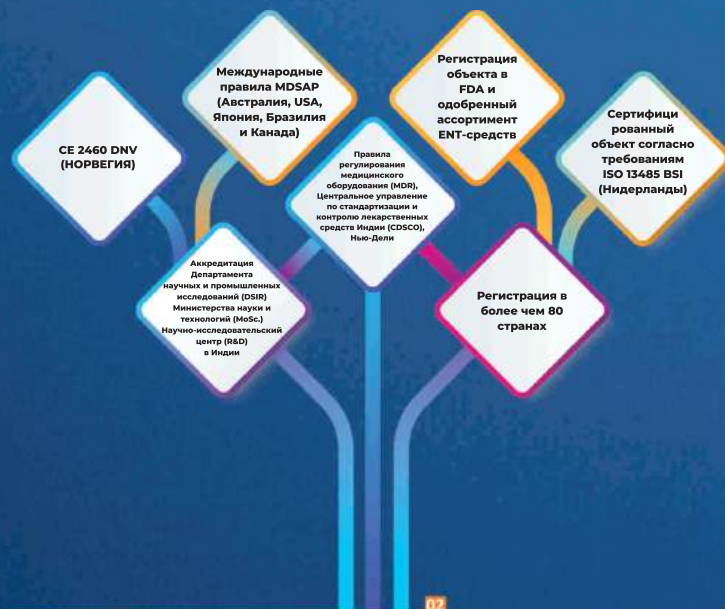



SURGISPON®

Рассасывающаяся гемостатическая желатиновая губка



Surgi-ORC®

Гемостатик на основе окисленной регенерированной целлюлозы



FLOGEL®

Текучая Желатиновая Гемостатическая Матрица



SURGI-PVA™

Медицинские губчатые повязки из поливинилового спирта



DENTOSPON®

Рассасывающаяся желатиновая губка с 5% коллоидного серебра



HAEMOVET®

Абсорбируемые Гемостатики Для Ветеринарного Исползования

SURGISPON®

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ
ЖЕЛАТИНОВЫЕ ГУБКИ И ПУДРА



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поглощает до 45 раз больше собственного веса
- pH-нейтральный, идеально подходит для использования с лекарственными препаратами
- Полностью рассасывается в течение 4 недель
- Может применяться как в сухом виде, так и пропитанным стерильным физиологическим раствором.
- Нетоксичный, неаллергенный, неиммуногенный и непирогенный
- Равномерная пористая структура гарантирует благоприятный гемостаз
- После полного рассасывания не оставляет остатков и не вызывает инкапсуляции
- Легко моделируется по размеру и форме в соответствии с потребностями
- Экономически эффективен
- Не требует специальных условий хранения

**ДОСТУПНО В БОЛЕЕ ЧЕМ
30 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РАЗМЕРАХ И В ФОРМЕ
ПУДРЫ**

SURGISPON®

АНАЛЬНЫЙ ТАМПОН



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уменьшает послеоперационную боль
- Не требует ручного удаления
- Может сократить пребывание в больнице до 4 дней
- Легко выводится при первой дефекации
- Быстро разжижается и самостоятельно выводится в течение 1–2 дней
- Обеспечивает безболезненное и лёгкое отхождение тампона
- Оснащён отверстием для введения газоотводной трубки
- Оптimalен для послеоперационного гемостаза
- Хорошо фиксируется в области кровотечения

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

80xØ30 мм

SURGISPON®

ПУДРА В БУТЫЛКЕ С ДОЗАТОРОМ
(СУХОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эффективно останавливает кровотечение за значительно более короткое время
- Предназначен для больших и неровных поверхностей
- Существенно снижает риск повторного кровотечения
- Не оставляет пустот между сгустком и поверхностью тканей
- Повышает механическую прочность сгустка за счёт усиления фибриновой матрицы
- Обладает высокой способностью к поглощению крови
- Отсутствие риска инкапсуляции и передозировки
- Подходит для открытых и лапароскопических операций
- После достижения гемостаза легко удаляется или вымывается

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 г, 2 г, 3 г, 5 г
Лапароскопические аппликаторы
14 CM и 38 CM



SURGISPON®

ПУДРА В КОНТЕЙНЕРЕ (ПАСТА)



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко моделируется в любую форму в соответствии с особенностями хирургического вмешательства
- Может применяться в сухом виде или в виде пасты после смешивания с физиологическим раствором
- Используется при стернотомии и краниотомии для контроля кровотечений в костях, полостях и трещинах
- Может наноситься вручную или с помощью шприца в труднодоступные области
- Не вызывает расхождения костных краёв, как обычный костный воск
- Обеспечивает быстрый и надёжный гемостаз в труднодоступных участках и при диффузном кровотечении из губчатой кости

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 г, 3 г и 5 г

SURGISPON®

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может использоваться в качестве матрицы-носителя совместно с лекарственными препаратами при регенерации костной ткани
- Удобен в применении: легко подрезается и моделируется
- Позволяет добавлять антибиотики для пациентов из группы высокого риска
- Способствует уменьшению резорбции альвеолярного гребня
- Сокращает время хирургического вмешательства и анестезии
- Используется в качестве каркаса для пролонгированного высвобождения факторов роста при заживлении лунок после удаления зуба
- Способствует формированию стабильного кровяного сгустка

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

10x10x10 мм, 12xØ8 мм,
20xØ10 мм, 20x20x07 мм,
1 г пудры в бутылке с дозатором,
1 г пастообразной пудры

DENTOSPON®

РАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ЖЕЛАТИНОВАЯ ГУБКА
С 5% КОЛЛОИДНЫМ СЕРЕБРОМ



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полностью и равномерно рассасывается в течение 4 недель
- Обеспечивает длительный антимикробный эффект
- Способствует стабилизации кровяного сгустка
- Обеспечивает заживление без осложнений
- Обладает одновременно гемостатическим и бактерицидным действием
- Мелкодисперсное коллоидное серебро обеспечивает непрерывное высвобождение ионов серебра
- Коллоидное серебро. Европейская фармакопея 0,5 мг
- Обеспечивает надёжную обработку лунки после удаления зуба
- Эффективна в отношении всех микроорганизмов полости рта, особенно грамотрицательных бактерий

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

10x10x10 мм, 14x7x7 мм

Surgi-ORC®

ГЕМОСТАТИК НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕННОЙ
РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ORIGINAL/STANDARD



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тонкое плетение из окисленной регенерированной целлюлозы
- Тканый материал обеспечивает видимость источника кровотечения
- Полностью биоабсорбируется в течение 7–14 дней
- $pH < 4$, что обеспечивает бактерицидные свойства
- Можно резать, не опасаясь осыпания краёв
- Обладает высокой гибкостью и хорошо адаптируется к тканям
- Подходит как для открытых операций, так и для малоинвазивной хирургии (MIS)
- Лёгкая трикотажная структура хорошо покрывает неровные поверхности тканей
- Обеспечивает надёжный гемостаз и выраженное бактерицидное действие

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

2 X 14 дюйма, 4 X 8 дюйма,
2x3 дюйма, 0,5x2 дюйма

Surgi-ORC®

ГЕМОСТАТИК НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕННОЙ
РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ FIBRIL



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мягкие, легкие ворсинки из окисленной регенерированной целлюлозы (ORC)
- 7 слоёв фибриллярного материала
- Обеспечивает высокую гибкость и адаптацию к хирургическим операциям
- Мягкий, слоистый материал соответствует и «плавится» в кровоточащей ткани
- Легкие слои можно раздвинуть для точного размещения вокруг места кровотечения
- Удобен для труднодоступных и неровных участков кровотечения
- Слои могут отделяться в необходимом количестве

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

1x2 дюйма, 2x4 дюйма,
4x4 дюйма

Surgi-ORC®

ГЕМОСТАТИК ИЗ ОКИСЛЕННОЙ
РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
NON-WOVEN/SNOW

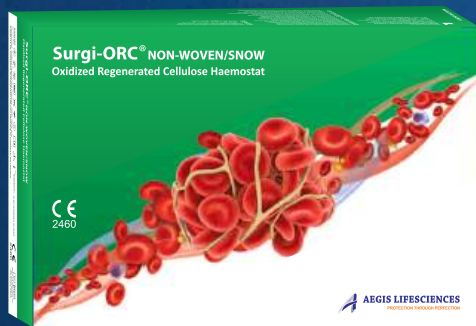

Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нетканая структура увеличивает площадь контакта с тканями
- Материал изготовлен методом иглопробивания с взаимно-сцепленными волокнами
- Удобен в использовании при открытых и малоинвазивных (MIS) вмешательствах, не прилипает к инструментам
- Обеспечивает более быстрый гемостаз по сравнению с оригинальной формой
- Предназначен для остановки минимального и умеренного кровотечения как на локальных, так и на обширных хирургических участках
- Сохраняет форму, обеспечивая хорошую адаптацию к тканям, удобство в работе и надёжное прилегание, особенно при лапароскопических операциях

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

1х2 дюйма, 2х4 дюйма,
4х4 дюйма

Surgi-ORC®

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ОКИСЛЕННОЙ РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ KNIT



Отсканируйте код для получения подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Более плотное плетение ORC предназначено для остановки более интенсивного кровотечения
- Мягкая и эластичная структура обеспечивает надёжную фиксацию шовного материала
- Способствует стабилизации кровяного сгустка
- Оптимальная структура полотна для случаев, когда требуется оборачивание и наложение швов
- Плотный материал ORC обладает высокой прочностью на растяжение

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

2х3 дюйма, 3х4 дюйма,
6х9 дюйма, 1х1 дюйма,
1х3 дюйма, 1х3.5 дюйма

Surgi-ORC®

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ОКИСЛЕННОЙ
РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ POWDER

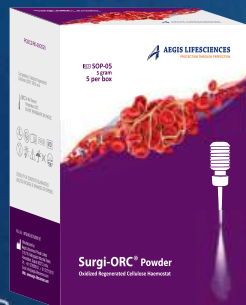

Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Натуральный рассасывающийся гемостатик растительного происхождения
- Содержит частицы двух фракций: мелкие и крупные
- Быстро останавливает диффузное кровотечение на широких поверхностях
- Формирует более прочный и устойчивый сгусток
- Поддерживает гемостаз даже в условиях ирригации
- Низкий pH обеспечивает бактерицидный эффект и повышает безопасность пациента
- Гемостаз достигается менее чем за 1 минуту
- Не содержит компонентов животного происхождения и добавок коллагена
- Подходит для открытых и лапароскопических операций

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 г, 2 г, 3 г, 4 г, 5 г

Лапароскопические аппликаторы
14 CM и 38 CM



FLOGEL®

НАБОР С ТЕКУЧЕЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ
МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ ЖЕЛАТИНА



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для остановки кровотечения в узких, неровных и труднодоступных участках при хирургических вмешательствах
- Обволакивает источник кровотечения, способствуя более быстрому гемостазу
- Сохраняет равномерную вязкость на протяжении всего времени применения
- Может смешиваться со стерильным физиологическим раствором или тромбином
- Может использоваться в течение 8 часов после смешивания с физиологическим раствором или тромбином
- Обеспечивает стабильную и равномерную текучесть для точного нанесения
- Полностью рассасывается в течение 4 недель
- Требуется менее строгих условий хранения по сравнению с аналогичными продуктами

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

5 мл, 6 мл,
8 мл, 10 мл



SURGISPON®

ЛОР-АССОРТИМЕНТ



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживает жизненно важные структуры тканей
- Предотвращает образование спаек и уменьшает отёк
- Имеет повышенную плотность по сравнению со стандартными кубами
- Быстро и эффективно останавливает кровотечение
- Снижает риск врастания тканей и образования костной ткани
- Не прилипает к тампонирующему материалу, перчаткам и инструментам
- Разделяет ткани и поддерживает их увлажнение
- Обеспечивает дренирование до первого послеоперационного осмотра для объективной оценки процесса заживления
- Удаляется безболезненно естественным потоком слизи

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

80x50x10 ММ, 10x10x10 ММ,
10x10x10 ММ HD, 20x20x07 ММ,
80x15x07 ММ, 80xØ07 ММ,
1 г порошка в бутылке с дозатором,
1 г порошок для образования замазки

SURGI-PVA™

НАЗАЛЬНЫЕ ТАМПОНЫ



Отсканируйте код для получения подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эффективное решение для контроля и отведения жидкости
- При увлажнении расширяется, обеспечивая эффективную тампонаду
- Технология Air-Foam препятствует росту бактерий, снижает риск инфекции и уменьшает неприятный запах
- Мягкий, поддерживающий, неадгезивный материал с низким раздражающим потенциалом
- Трёхмерная взаимосвязанная структура с открытыми ячейками обеспечивает прочность и мягкость губки, способствуя атравматичному удалению
- Создаёт оптимальное давление при лечении носового кровотечения (эпистаксиса)
- Воздухопроницаемый канал уменьшает дискомфорт пациента
- Выпускается с нитью и/или воздуховодной трубкой

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартный назальный тампон - 45x20x15 мм, 80x20x15 мм,
 Анатомический назальный тампон - 80x30x15 мм,
 Тампон для эпистаксиса - 100x25x15 мм,
 Синусовый назальный тампон - 35x12x6 мм и 35x12x9 мм

SURGISPON®

УХОД ЗА РАНАМИ В ОБЛАСТИ НОСА И НА КОЖЕ



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гипоаллергенный, стерильный, натуральный и безопасный материал
- Эффективно останавливает кровотечение
- Мягкая структура обеспечивает безболезненное удаление
- Обладает высокой способностью поглощать кровь и экссудат
- pH-нейтральный — идеальный носитель для антибиотиков и других лекарственных средств
- Предназначен для стойких носовых и кожных кровотечений, возникающих вследствие травм, несчастных случаев, аллергических реакций и других состояний
- Нерастворим в воде и полностью рассасывается

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

40x10x10 мм

SURGISPON®

СЖАТАЯ НАЗАЛЬНАЯ ПОЛОСКА




Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поглощает до 45 раз больше собственного веса
- Имеет нейтральный pH, инертен и является идеальным носителем лекарственных средств (антибиотиков, тромбина и т. д.)
- Принимает форму носовой полости, что облегчает установку и обеспечивает лучшую видимость
- Расширяется при поглощении жидкости, обеспечивая эффективный тампонирующий эффект
- Используется в качестве местного кровоостанавливающего средства и повязки
- Служит в качестве интраназальной шины/тампона
- Обеспечивает опору и каркас для регенерации тканей
- Помогает предотвратить спайки между перегородкой и полостью носа

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

80x15x02 мм, 40x10x02 мм

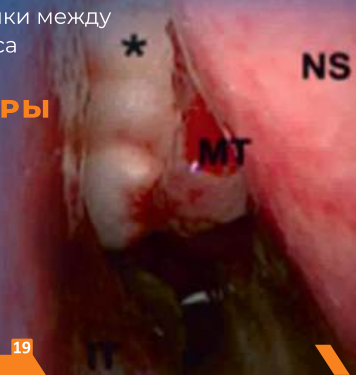

SURGISPON®

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ ПЛАСТЫРЬ



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ, предназначенные для минимизации кровотечений в области шва
- Улучшенное удержание шва, низкая тромбогенность и устойчивость к аневризальному расширению
- Долговечность: Не подвержена износу, обеспечивая прочность в разных направлениях
- Простота использования: легко подрезается до нужного размера и адаптируется к анатомическим особенностям сердечно-сосудистой системы.
- Совместим с антибиотиками благодаря нейтральному уровню pH
- Выпускается в виде порошкообразной замазки для остановки кровотечения из губчатой кости

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

40x60x05 MM, 70x100x05 MM,
60x120x05 MM, 80x160x05 MM
120x120x05 MM, 150x200x05 MM,
125x80x05 MM, 250x80x05 MM

SURGISPON® DIAL

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ
ГЕМОДИАЛИЗА



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для остановки кровотечения в месте пункции у пациентов после гемодиализа при лёгком прижатии
- Обеспечивает механическую матрицу, способствующую агрегации тромбоцитов и коагуляции, облегчая формирование сгустка
- Высокопористая структура поглощает примерно в 45 раз больше собственного веса
- Обеспечивает быстрый и эффективный гемостаз, сокращая время восстановления
- Сообщений о побочных эффектах не зарегистрировано
- Не оставляет остаточного материала и не вызывает инкапсуляции
- Легко наносится и безболезненно удаляется
- Может использоваться в сухом виде и совместно с лекарственными препаратами и антибиотиками

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

30x30x10 ММ, 20x20x07 ММ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Шаг : 1



Шаг : 2



Шаг : 3



Шаг : 4



SURGI-PVA™

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ТАМПОН



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из уникальной губки из поливинилового спирта (PVA) с высокой впитывающей способностью и способностью удерживать жидкость
- Биосовместим, не содержит ворса и свободных волокон
- Изготовлены по технологии Air Foam
- Не способствует росту бактерий
- Обладает высокой прочностью на разрыв
- Расширенная эргономичная рукоятка обеспечивает лучший контроль
- Обеспечивает быстрое впитывание и эффективный контроль жидкости
- Впитывает объём жидкости, превышающий собственный сухой вес более чем в 8 раз
- Безворсовый материал поддерживает чистоту операционного поля

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

17x8x2 мм

Каждая индивидуальная упаковка
содержит 5 стерильных изделий

HAEMOVET®

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ГЕМОСТАТИКИ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Отсканируйте
код для получения
подробной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает эффективный, быстрый и удобный гемостаз гемостаз
- Благодаря высокой пористости способен впитывать до 45 раз больше собственного веса
- Полностью рассасывается в течение 4 недель
- Сокращает время хирургического вмешательства и анестезии
- Может использоваться в сухом виде или после пропитывания стерильным физиологическим раствором
- Легко подрезается до необходимого размера и формы
- Обеспечивает сухое и хорошо просматриваемое операционное поле
- Способствует сокращению периода восстановления животного

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

10x10x10 MM, 60x20x07 MM,
80x50x10 MM, 125x80x10 MM
1/3/5 г пастообразная пудра
1/2/3/5 г пудра с дозатором
С 5% коллоидного серебра -
10x10x10 MM, 14x07x07 MM,
20x20x20 MM





Изделия, изготавливаемые по индивидуальным размерам, подходят практически для всех видов хирургических вмешательств и обеспечивают удобство работы хирурга.



Единственное в мире предприятие по эксклюзивному производству рассасывающихся гемостатических продуктов с самым большим производством

30%+ Ежегодный рост



Наиболее эффективные с точки зрения затрат решения для больных

100+ Присутствие в странах по всему миру

КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС

A-504, Swati Trinity, Nr. Shantipura Circle, SP Ring Road,
Ahmedabad, Gujarat-380058, INDIA.

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Aegis Lifesciences Private Limited
215/216, Mahagujarat Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat-382213, India.

☎ +91 9512903131

☎ +91 9512883131

✉ marketing1@aegis-lifesciences.com / aegis.lifesciences@gmail.com



Веб-сайт



Youtube

AL/CAT/GEN/01/R1 | Date:08/2026

ВАЖНО: Выбор и применение изделия должны основываться на клиническом опыте хирурга и конкретных требованиях операционного поля. Для получения полной информации по способу применения, противопоказаниям, предупреждениям и мерам предосторожности ознакомьтесь с инструкцией по применению (IFU).

